

## ペディアトリックイモビライゼーションシリーズ

メディキッズシリーズは背中部に内蔵されている空気袋を膨らませてニュートラルポジションを取る事ができる乳幼児専用の器具です。

ペディスリーブ

ベビーボード



### ペディスリーブ モデル677 (小児用)



- ペディスリーブの中にバックボード（別売）を通して使用します。
- 金属を使用していないので装着したままレントゲン撮影が可能です。  
（送気球のバルブを除く）
- 使用対象範囲は幼児から小児（体重約5～27kg）です。
- コンパクトに丸めてバッグ状になりますので収納に場所を取りません。
- 頭部以外の固定ベルトは縫い付けてありますので素早い固定が可能です。
- 寸法：101×50×2.5（cm）重量：1.5kg。



収納時（50×20×22cm）




傷病者の症状に応じて様々な固定方法を取ることができます

### ベビーボード モデル676 (新生児用)



※内寸が60cm以上の保育器に使用できます。

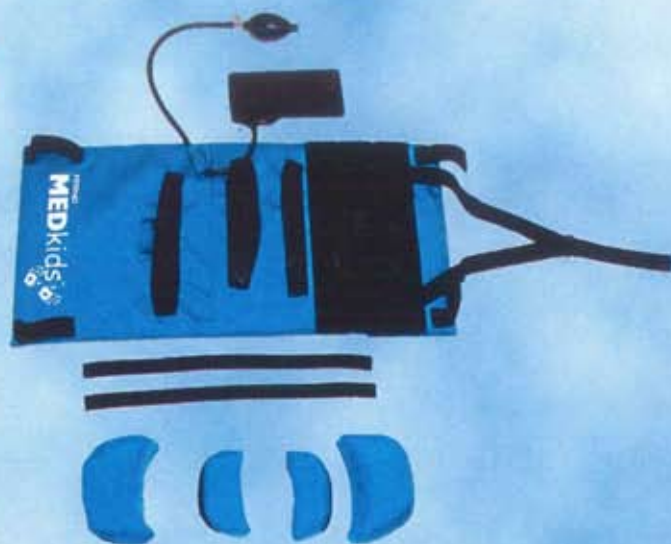

- 手持ち、又はストレッチャーに取り付けて搬送できます。
- 空気袋を膨らませるとニュートラル/エアウェイポジションを取る事ができます。
- 2種類4個のヘッドブロックが標準装備されています。
- 頭部以外の固定ベルトは縫い付けられており、素早く固定する事ができます。
- 金属を使用していないので装着したままレントゲン撮影が可能です。(送気球のバルブを除く)
- 使用対象範囲は新生児から幼児(体重約1~7kg)です。
- 寸法: 58×28×2 (cm) 重量: 2.5kg。



フラットな状態

ニュートラルポジション

エアウェイポジション



気道確保が行い易くなります



ストレッチャーとの併用



ヘリコプター輸送



2種類のヘッドブロックを使用し、傷病者の症状に応じて様々な固定方法を取る事ができます

輸入元:



**FERNO**  
**Japan, Inc.**

**ファーノ・ジャパン・インク 日本支社**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-8 第3FKビル3F

TEL 03(5820)4649(代) FAX 03(5820)4669

商品・技術センター: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木528-1

TEL 0426(77)6656(代) FAX 0462(77)6603

米国本社: オハイオ州ウィルミントン ウェイルウェイ70

販売店: