

ヘリタック ストーク (乳幼児搬送レスキューキャリア)



Helitack Stork

CMCレスキュー社製

- ◇ヘリタックストークは、大洪水時の経験によって乳幼児や小児を安全に守りながら救出できる機材の必要性を感じて設計・製造されています。
- ◇トップパネルは透明で、收容された要救助者の容体観察を継続することができ、雨やダウンウオッシュをさえぎることができます。
- ◇ヘリコプターでホイストして救出ができるように設計されています。折りたたむと小さくなるので収納が容易です。
- ◇底部と側面には、形状の保持と浮力を得るために厚さ25mmのクローズセルフォームが内張りされています。
- ◇ハンドルに取り付けられたレッグの末端にはスチール製Dリングが取り付けられています。
- ◇材質は丈夫で耐久性のある1000デニールのコーデュラナイロン製で、厳しい環境の中でも要救助者を守ります。



136cm

小児用バックボードに固定した状態で收容できるように、ストークの形を変えて広げることができます。

インファント レストレイント システム



ストークの内部で要救助者を固定するハーネスはベルクロ式のフラップで収納されています。




固定用ハーネス

フラップ(ベルクロ式)


固定用ハーネスは底部に縫製されており、フラップを開いて使用します。ハーネスはコブラバックル式で脱着を素早く行うことができます。

ベンチレーション システム

換気のためにトップパネルの脇と頭部側に通気性のよいメッシュのネットが取り付けられ、カバーがベルクロで取り付けられています。カバーは必要に応じて開閉することができます。

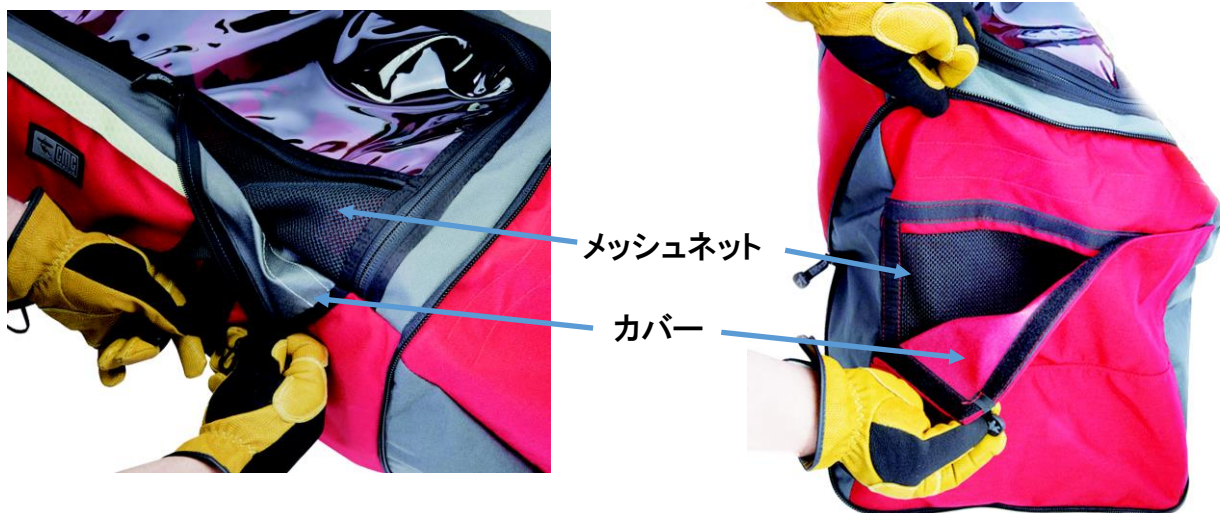

夜間での活動において、視認性向上のために蛍光性の光反射テープが縫い付けられています。透明なトップパネルの開閉はジッパーで行います。

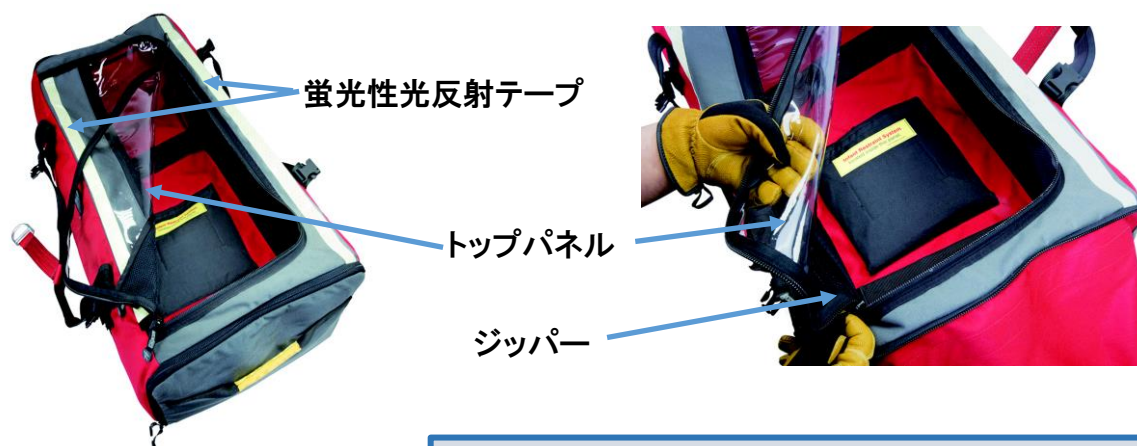

収納状態



仕様

安全荷重：45kg
重量：3.2kg
寸法：79×41×32cm
収納寸法：79×41×18cm
材質：コーデュラナイロン(1000デニール)
コード：724309



輸入元：ファーノ・ジャパン・インク日本支社

総発売元：
株式会社ジェイ・プランニング
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-26-12
TEL：0422-20-4488
FAX：0422-20-8440
URL：<http://www.jppla.co.jp>

販売店：