



FERNO[®] Product Catalogue

SAM[®] ペルビックスリング II

骨盤骨折の患者を医療機関へ搬送する際、非侵襲的に骨盤を固定する一体型のデザインのベルトです。

主な特長

① 低摩擦性の素材

裏側は低摩擦性の素材を採用しているため、重度の外傷の患者への装着をサポートします。

② オートストップ バックル

クリック音により、緩みがなく、適切な圧で装着されたことを確認できます。

③ 精密な設計

精密に設計された穴の位置とオートストップバックルにより、素早い装着が可能です。強度のあるベルクロにより、しっかり固定します。

④ テーパーデザイン


前方は幅が狭いデザインのため、装着したまま尿道カテーテル、画像ガイド下での処置、腹部手術を行うことができます。

⑤ X線透過性

X線透過性の素材のため（バックルのバネを除く）、装着したままX線撮影、CTスキャンを行うことができます。3テスラ以下のMRIでの使用が可能です。

⑥ 3サイズ

S、M、Lの3サイズがあるため、患者に適したサイズを選択できます。

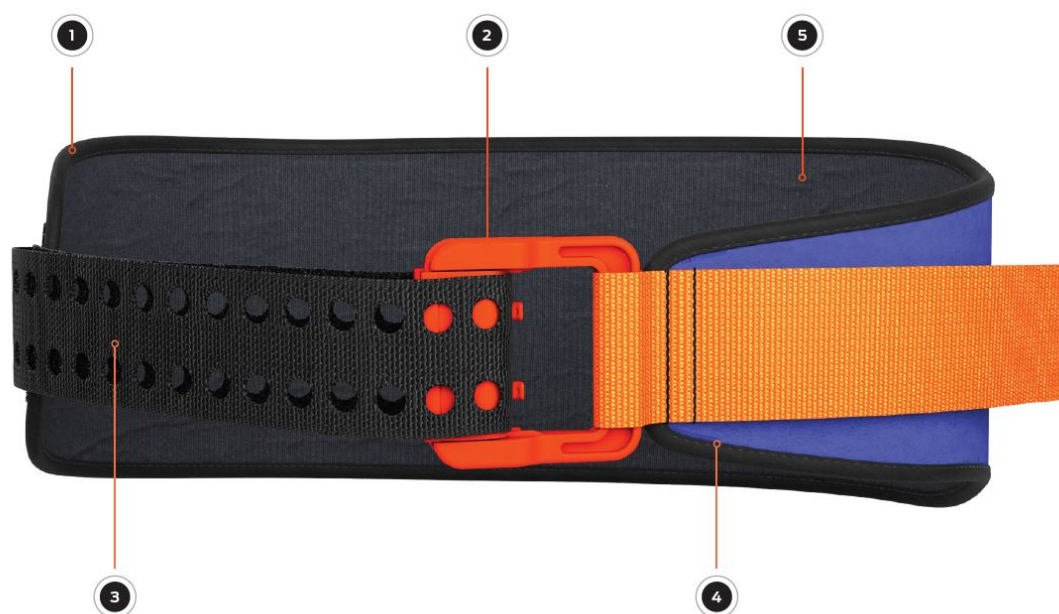

基本原理

プレジジョンストラップを引き、150Nに達するとオートストップバックルが作動して突起が出ます。その後、ベルクロを使用して固定します。



サイズ/寸法

- S 69-114 cm
- M 81-127 cm

製品コード

- 030216006 SAMペルビックスリングII Sサイズ
- 030216007 SAMペルビックスリングII Mサイズ

医療機器届出番号

13B1X00226000040



製造販売元 ファーノ・ジャパン・インク

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-9-5 FKビル
4F TEL 03-5820-4649 FAX 03-5820-4669

www.ferno-jp.com



製造元 SAM Medical Products

12200 SW Tualatin Rd., Ste 200
Tualatin, OR 97062 USA

製品のご使用にあたっては、製品に付属の、取扱説明書を必ずお読みください。
本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。